

# KONDOME

## GEBRAUCHSANWEISUNGEN

### VORSICHTSMAßNAHMEN


- Sie sind nur für den **einmaligen Gebrauch bestimmt**
- An einem **trockenen, kühlen Ort** (unter 37 °C) ohne direkte Sonnenstrahlung **aufbewahren**.
- Wenn das Material klebrig oder offensichtlich beschädigt ist, den Kondom **NICHT** verwenden.
- Wenn die Farbe ungleichmäßig und verändert ist, den Kondom **NICHT** verwenden
- **Kein** Gleitgel auf Ölbasis verwenden (Vaseline, Mineralöle, Pflanzenöle, Kältemittel)
- Nicht-vaginale Verwendung kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ein Kondom auf dem Penis rutscht oder ihn beschädigt. Verwenden Sie daher Analkondome für Analsex.
- Wenn das Kondom platzt oder Flüssigkeit austritt, suchen Sie innerhalb von 72 Stunden einen **Arzt** auf.
- Einige lokale **Medikamente** können die **Wirksamkeit** des Latex-Kondoms **beeinträchtigen**.

### SCHUTZ VOR NEBENWIRKUNGEN

- Kondome helfen bei jeder richtigen Anwendung bei Geschlechtsverkehr eine Schwangerschaft zu verhindern und verringern das Risiko von HIV / AIDS und anderen sexuell übertragbaren Infektionen.
- Latexkondome schließen die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft und Übertragung von sexuell übertragbaren Infektionen nicht vollständig aus
- Wenn Sie glauben, dass Sie mit STIs infiziert sein könnten oder um weitere Informationen zu Latexkondomen oder weitere Informationen zu STIs zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren **Arzt**.
- Wenn Sie Fragen zur Verhütung haben, insbesondere aus gesundheitlichen Gründen, um eine Schwangerschaft zu vermeiden, oder wenn Sie vermuten, dass Sie nach dem Geschlechtsverkehr schwanger sein könnten, wenden Sie sich an Ihren Arzt.
- Naturkautschuklatex kann **allergische Reaktionen** hervorrufen!

### TIPPS ZUR VERWENDUNG

- Prüfen Sie den **Gebrauchsdatum** vor der Verwendung .
- Wenn eine Verpackung offensichtlich **beschädigt** ist, verwenden Sie ein anderes unbeschädigtes Kondom.

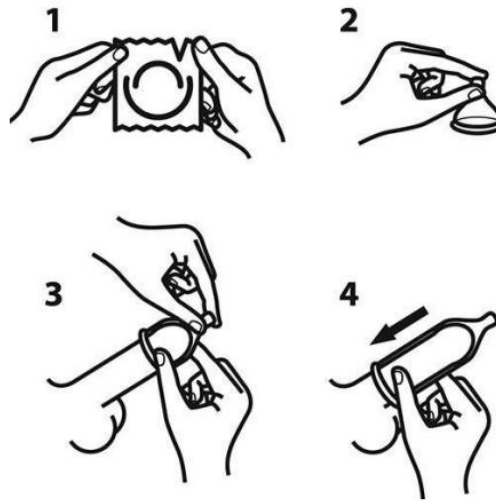

1. Öffnen Sie die Hülle an der gezackten Kante und gehen Sie vorsichtig mit dem Kondom um, da es durch unsachgemäße Verwendung von Nägeln und scharfen Gegenständen wie Schmuckpiercings leicht beschädigt werden kann.
  2. Prüfen Sie, ob der sich abwickelnde Teil des Kondoms außen liegt. Wenn sich dieser Teil auf der Innenseite befindet, haben Sie das Kondom falsch installiert. Drücken Sie die Kappe oben auf das Kondom, damit es keine Luft einschließt.
  3. Während Sie die Kondomkappe zusammendrücken, legen Sie das Kondom auf den Kopf des Penis.
  4. Schrauben Sie das Wickelteil mit der anderen Hand ab.
- Wenn sich das Kondom während des Geschlechtsverkehrs zurückdreht, schrauben Sie es sofort ab.
  - Wenn Sie das Gefühl haben, dass das Kondom vom Penis rutscht oder dass es den Penis zu fest umschließt, halten Sie an und entfernen Sie es, sonst riskieren Sie, dass das Kondom platzt
  - **Unmittelbar** nach dem Ejakulation und solange der Penis noch erigiert ist, halten Sie das Kondom fest Penis vor dem Entfernen, dann einfach das Kondom entfernen, einwickeln und in den Müll werfen
  - Bitte spülen Sie Kondome **NICHT** in der Toilette!